


# 家具調木製ポータブルトイレ TK-1 取扱説明書

このたびは家具調木製ポータブルトイレTK-1をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、よくご理解の上ご使用ください。

## ⚠ 安全上のご注意

- 座板・便座の上に立ち上がったり、無理な積み重ねはしないで下さい。転倒や破損の恐れがあります。
- ひじ掛けの取外し・便座高さの調節を行った際は、固定ネジはしっかりと締めこんで下さい。  
また固定ネジがゆるむと事故の原因となりますので、定期的に確認して下さい。

### 部 品 名

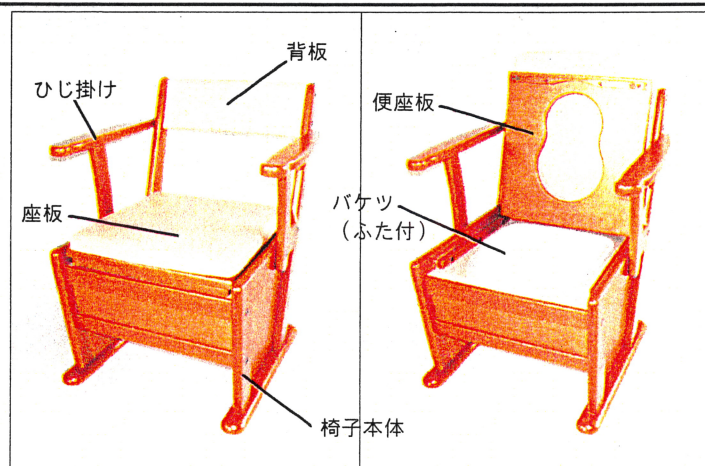

製品重量：約12kg

(付属品) 便座シート=1セット  
六角レンチ=1本


主材：天然木(ラバーウッド)  
塗装：抗菌ウレタン塗装(ブラウン色)  
背・座板：塩ビレザークッション  
バケツ・フタ：ポリエチレン樹脂成形品  
便座シート：ポリエステル+アクリル樹脂

### TK-1の特徴

- ・取外せる：ひじ掛け  
付属の六角レンチでセットネジをゆるめとひじ掛けが取外せます。(両肘とも外せます)



- ・お掃除ラクラク設計  
座板・便座・バケツが簡単に取り外せるので、お掃除が簡単です。

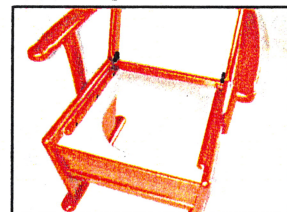



### 便座高さの調節

体格や症状に合わせて便座の高さ調節が出来ます。付属の高さ調節パーツを脚底にセットネジで固定してください。


便座高さ：375mm

便座高さ：400mm

便座高さ：425mm

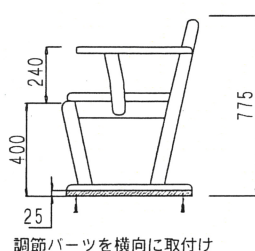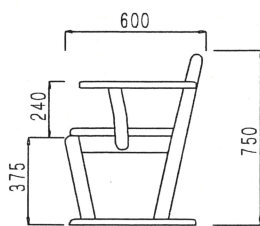

調節パーツを横向に取付け

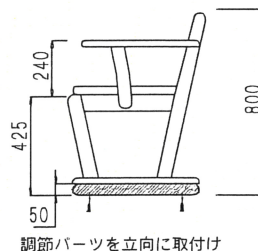

調節パーツを立向に取付け

- ・かんたん：抗菌便座シート  
抗菌・防臭加工されていますので衛生的です  
また、取り付け、取り外しが簡単にでき、繰り返し洗濯できます。



## ⚠ お手入れ方法

- ・お掃除は水性またはぬるま湯か中性洗剤をうすめたものを使用して下さい。
- ・酸性やアルカリ性の洗浄剤、塩素系の漂白剤、消毒液、シンナー・ベンジン等の溶剤でのお手入れは絶対に行わないで下さい。製品の劣化・変色・色落ちする恐れがあります。
- ・直射日光、熱風乾燥は絶対にさけてください。製品の劣化・変色・色落ちする恐れがあります。

■お問い合わせ先

**豊田通商株式会社**

住環境部 シニアビジネスグループ

〒450-8575 名古屋市中村区名駅4丁目9番8号(センチュリー豊田ビル)  
TEL 052-584-5277 FAX 052-584-5503